Cardiac Science


Elektrody dla dorosłych Powerheart G5

432,00 zł brutto

400,00 zł netto

Elektrody do modelu AED wskazanego w opisie i dokumentacji.

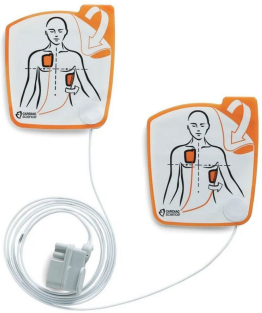

Opis produktu

Elektrody defibrylacyjne Powerheart® G5 Intellisense® dla dorosłych.

Elektrody Intellisense® to dwie identyczne elektrody bez polaryzacji (które można przyłożyć w dowolnej z dwóch pozycji), aby zmniejszyć ryzyko pomyłki i zaoszczędzić cenny czas podczas akcji ratunkowej.

Dzięki opatentowanej technologii Rescue Ready® i wbudowanemu układowi elektronicznemu, elektrody Intellisense przekazują do urządzenia Powerheart G5 informacje dotyczące m.in. obecności (prawidłowgo podpięcia do AED) i sprawności elektrod, rodzaju pacjenta, poziomu energii i protokołu RKO, daty ważności

elektrod oraz innych kluczowych parametrów.

Cechy i zastosowanie

Produkt przeznaczony do zastosowania wskazanego w dokumentacji danego modelu.

Dane techniczne

Marka: Cardiac Science
Kod produktu: XELAED001C
- Typ: elektrody defibrylacyjne dla dorosych.

- Rodzaj: bez polaryzacji (elektrody identyczne, które można przyłożyć w dowolnej z dwóch pozycji).

- Cechy: z nałożonym żelem, samoprzylepne, jednorazowego użytku.

- Przeznaczone do krótkotrwałego użycia (mniej niż 8 godzin).

- Wiek i waga pacjenta: powyżej 8 lat lub waga powyżej 25 kg.

- Okres magazynowania: 24 miesiące.

- Długość przewodu: całkowita: ok. 132 cm; poza opakowaniem: ok. 37 cm.

- Powierzchnia jednej elektrody: całkowita: ok. 152,5 cm?; żelu przewodzącego: ok. 99,5 cm?.

Ostrzeżenia

- Nie używać ponownie elektrod. Ponowne użycie może prowadzić do: oparzenia skóry, nieprawidłowe działanie AED, przeniesienie zakażeń między pacjentami.

- Nie otwierać opakowania przed użyciem.

- Nie używaj uszkodzonych elektrod. Przed użyciem sprawdź przewód i złącza pod kątem uszkodzeń.

- Niewłaściwe usunięcie niebieskiej folii ochronnej może wpłynąć na skuteczność terapii.

- Nie ciągnąć za przewody, aby oddzielić elektrody od niebieskiej folii.

Podczas umieszczania elektrod

- Umieść elektrodę co najmniej 2,5 cm (1 cal) od wszelkich wszczepionych urządzeń.

- Upewnij się, że skóra pacjenta jest czysta i sucha przed użyciem.

Zawartość i dobór wyposażenia

Zakres dostawy i zgodność z posiadanym wyposażeniem potwierdzamy przy przygotowaniu oferty.

Ignis Rescue spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kalwaryjska 38, 32-051 Krzęcin
+48 694 245 257 | biuro@ignisrescue.pl
NIP 9442301269 | KRS 0001238570 | REGON 544618144