Cardiac Science

Elektrody dla dzieci Powerheart G5


626,00 zł brutto


579,63 zł netto

Elektrody do modelu AED wskazanego w opisie i dokumentacji.





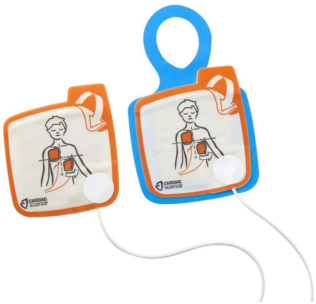

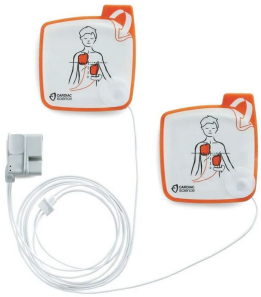

Opis produktu

Elektrody defibrylacyjne Powerheart® G5 Intellisense® dla dzieci.

Elektrody pediatryczne do Powerheart G5 posiadają dwie identyczne elektrody bez polaryzacji (które można przyłożyć w dowolnej z czterech pozycji), aby zmniejszyć ryzyko pomyłki i zaoszczędzić cenny czas podczas akcji ratunkowej.

Zalecane wyłącznie dla pacjentów w wieku 8 lat lub młodszych albo ważących mniej niż 25 kg, ponieważ defibrylator Powerheart G5, po podłaczeniu elektrod XELAED003C, automatycznie rozpoznaje, że są to

elektrody pediatryczne i podaje wyładowanie o obniżonej energii.

Dzięki opatentowanej technologii Rescue Ready® i wbudowanemu układowi elektronicznemu, elektrody Intellisense przekazują do urządzenia Powerheart G5 informacje dotyczące m.in. obecności (prawidłowego podpięcia do AED) i sprawności elektrod, rodzaju pacjenta, poziomu energii i protokołu RKO, daty ważności elektrod oraz innych kluczowych parametrów.

Cechy i zastosowanie

Produkt przeznaczony do zastosowania wskazanego w dokumentacji danego modelu.

Dane techniczne

Marka: Cardiac Science
Kod produktu: XELAED003C
- Typ: elektrody defibrylacyjne dla dzieci.

- Rodzaj: bez polaryzacji (elektrody identyczne, które można przyłożyć w dowolnej z dwóch pozycji).

- Cechy: z nałożonym żelem, samoprzylepne, jednorazowego użytku.

- Przeznaczone do krótkotrwałego użycia (mniej niż 8 godzin).

- Wiek i waga pacjenta: poniżej 8 lat lub waga poniżej 25 kg.

- Okres ważności: 24 miesiące. Nie należy używać po dacie ważności podanej na opakowaniu. AED automatycznie odczytuje datę ważności elektrod i informuje użytkownika o ich przeterminowaniu.

- Długość przewodu: całkowita: ok. 133 cm; poza opakowaniem: ok. 30,5 cm.

- Powierzchnia jednej elektrody: całkowita: ok. 116 cm?; żelu przewodzącego: ok. 58 cm?.

Ostrzeżenia

- Nie używać ponownie elektrod. Ponowne użycie może prowadzić do: oparzenia skóry, nieprawidłowe działanie AED, przeniesienie zakażeń między pacjentami.

- Nie otwierać opakowania przed użyciem.

- Nie używaj uszkodzonych elektrod. Przed użyciem sprawdź przewód i złącza pod kątem uszkodzeń.

- Niewłaściwe usunięcie niebieskiej folii ochronnej może wpłynąć na skuteczność terapii.

- Nie ciągnąć za przewody, aby oddzielić elektrody od niebieskiej folii.

Podczas umieszczania elektrod

- Umieść elektrody na ciele pacjenta w ułożeniu przednio-przednim lub ułożeniu przednio-tylnym (dziecko posiada małą klatkę piersiową, a przyklejanie w opcji przód-tył zapobiega stykaniu się elektrod, odstęp pomiędzy elektrodami w ułożeniu przednio-przednim powinien wynosić nie mniej niż 10 cm).

- Umieść elektrodę co najmniej 2,5 cm (1 cal) od wszelkich wszczepionych urządzeń.

- Upewnij się, że skóra pacjenta jest czysta i sucha przed użyciem.

Zawartość i dobór wyposażenia

Zakres dostawy i zgodność z posiadanym wyposażeniem potwierdzamy przy przygotowaniu oferty.

Ignis Rescue spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kalwaryjska 38, 32-051 Krzęcin
+48 694 245 257 | biuro@ignisrescue.pl
NIP 9442301269 | KRS 0001238570 | REGON 544618144