
Consultronix

Sonda do pomiaru temperatury na błonie bębenkowej

87,00 zł brutto

80,56 zł netto

Wyposażenie do pomiaru temperatury głębokiej zgodnie z dokumentacją.

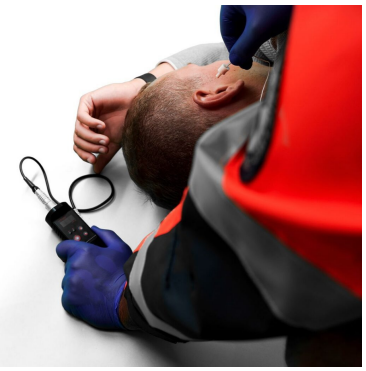







Opis produktu

Bębenkowa sonda jest przeznaczona do rutynowego monitorowania temperatury głębokiej pacjenta z użyciem termometru HOPETHERM w celu diagnostyki hipotermii na wczesnym etapie akcji ratowniczej w fazie przedszpitalnej.

Sonda składa się z zestawu przewodów wykrywających temperaturę, do którego na dystalnym końcu

przymocowana jest końcówka douszna do aplikacji do kanału słuchowego. Element douszny może składać się z piankowej zatyczki do uszu i wacika lub samego wacika (w przypadku sond DeRoyal), lub dwuczęściowej gąbkowej końcówki (w przypadku sondy Smiths Medical).

Stosowanie sond do pomiaru temperatury na błonie bębenkowej jest przeciwwskazane w przypadku, w którym występują stany patologiczne uszu, takie jak infekcje, stany zapalne, guzy, perforacja błony bębenkowej lub polipy. Poza tym sondy bębenkowe są przeciwwskazane u noworodków i pacjentów, których ucho jest zbyt małe lub ma anatomiczny kształt i rozmiar nieodpowiedni do wprowadzenia sondy.

Cechy i zastosowanie

Cechy produktu

- Miękka pianka pamięciowa lub gąbka dopasowuje się do kanału słuchowego, minimalizując ryzyko uszkodzenia błony bębenkowej, dodatkowo działa jako bariera uszczelniająca dostęp powietrza z otoczenia.

- Rurka wzmacniająca przewód ułatwia umieszczenie sondy w kanale słuchowym i działa jako odciążenie przewodu.

- Cienki 36-żyłowy przewód zapewnia dokładne monitorowanie temperatury poprzez zmniejszenie wpływu temperatury otoczenia.

- Typ czujnika: termistor YSI 400 (precyzja pomiaru z dokładnością 0,2°C w zakresie temperatur od 5°C do 45°C).

- Nie zawiera lateksu.

- Sonda jest produktem jednorazowym.

NIE NALEŻY WKŁADAĆ SONDY ZBYT GŁĘBOKO. Końcówka sondy nie musi dotykać błony bębenkowej, aby działała prawidłowo. Gdy jest wyczuwalny opór należy zaprzestać dalszego wsuwania sondy i lekko ją wycofać. U przytomnego pacjenta sonda powinna zostać częściowo lub całkowicie wycofana, gdy pacjent zgłasza dyskomfort.

Dane techniczne

Marka: Consultronix (HOPETHERM)
Kod produktu: HT-SB-1
Szczegóły techniczne znajdują się w opisie i dokumentach do pobrania, jeśli są dostępne.

Zawartość i dobór wyposażenia

Zakres dostawy i zgodność z posiadanym wyposażeniem potwierdzamy przy przygotowaniu oferty.

Ignis Rescue spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kalwaryjska 38, 32-051 Krzęcin
+48 694 245 257 | biuro@ignisrescue.pl
NIP 9442301269 | KRS 0001238570 | REGON 544618144